

IPL8800
VELVET SKIN PRO

beurer
belleza



IPL8800 IPL VELVET SKIN PRO

Dispositivo de depilación prolongada

Ingeniería
Alemana



La app gratuita "Beurer MyIPL" lo guía a través del proceso y crea un plan individual para una aplicación profesional de IPL en el hogar



Hasta
600,000
pulsos de luz

Hasta 600,000 pulsos de luz



operación
sin cables

Cómodo de usar gracias a su diseño inalámbrico



Detección de tono de piel:
establece automáticamente el nivel de energía correcto

Tratamiento de cuerpo completo en aprox. 21 minutos¹⁾

Gran área de luz de 4.5 cm² para un tratamiento rápido

Con el práctico modo "Auto-Flash" para un uso conveniente

6 niveles de intensidad diferentes

Accesorio adicional para rostro y línea de bikini

Tecnología clínicamente probada para la máxima seguridad en el hogar

Máxima seguridad con el tipo de piel 2 en 1 y el sensor de contacto con la piel

Hasta un 50% de reducción del vello después de 3-4 tratamientos

Tecnología de luz IPL de última generación que también es utilizada por dermatólogos para la depilación profesional, desactiva la raíz del cabello profundamente debajo de la piel y previene el crecimiento del cabello

Filtro UV integrado para proteger la piel

Ineficaz en tonos de piel oscuros



Puede ser ineficaz en cabello claro o blanco

Incluye batería de iones de litio de 7.4 V ~ 2,500 mAh

Dimensiones del producto (LaxAnxAI): 17.5 x 6.5 x 20 cm

Peso del producto: Aprox. 480 g



575.00_IPL8800_2021-05-19_02_DS_EN_BEU Sujeto a errores y cambios


* Estudio dermatológico, 20 mujeres, Institut proDERM Hamburg, estudio no. 14.0309-11
1) al nivel de energía más bajo para brazos, piernas, cara, axilas y área del bikini

IPL8800
VELVET SKIN PRO


beurer
belleza




MODO DE ACCIÓN

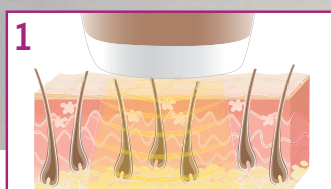

1 La melanina en el cabello absorbe la luz (IPL)

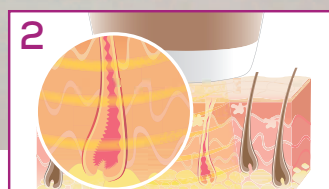

2 El calor generado desactiva al folículo piloso

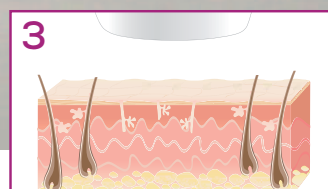

3 El cabello se cae y no sigue creciendo.

TABLA DE COLORES DE CABELLO Y PIEL

| Tono de cabello | Tono de piel | | | | | |
|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | X | X | X | X | X | X |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |



APLICACIÓN

tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento



works with

Download on the **App Store**

GET IT ON **Google Play**

• iOS ≥ 8.0
• Android™ ≥ 4.4

Lista de dispositivos compatibles