



BF 1000
Super Precisión

beurer
hogar

Báscula Diagnóstica BF1000 de Super Precisión con Análisis Segmentado del Cuerpo con 8 Electrodo



Super Precisión con Análisis Segmentado
del Cuerpo con 8 Electrodo



Visualización segmentada de la grasa corporal y
porcentaje muscular (brazos, piernas, tronco).

Medición cruzada con 8 electrodos para el monitoreo preciso de áreas
diferentes del cuerpo (brazos, piernas, tronco).

Determinación del peso corporal, grasa corporal, agua corporal,
porcentaje de musculo, masa ósea, BMR/AMR (Kcal).

Determinación de la grasa visceral (grasa orgánica/grasa abdominal).

Rotación básica y activa en Kcal.

Pantalla de matriz de puntos en relieve sobre un soporte de aluminio
con retroiluminación azul para una lectura óptima.

Visualización de hora y fecha.

Guía de usuario intuitiva en 5 idiomas (D/GB/F/ES/I).

Con software/ aplicación "beurer HealthManagerPro" para descargar gratis.

Con electrodos de acero inoxidable (de mano).

ITO** superficie de pesaje recubierta con vidrio grueso de seguridad de
10 mm de espesor.

Cambiar a kg/lb/st

Capacidad: 200 kg

Graduación:

- 0.1% para grasa corporal, agua corporal e indice muscular.

- 50 g para peso corporal y masa de hueso.

5 niveles de actividad.

10 memorias de usuario con 30 espacios de medición para cada uno
+ modo invitado

Indicación de sobrecarga.

Botón de encendido e inicio rápido de tecnología.

Apagado automático.

Incluye baterías AA 4 x 1.5 V

Medidas del producto (LxAxA): 38 x 39 x 100 cm.

Peso del producto: 6.35 kg aproximadamente.



748.60_BF1000_2022-01-17_02_DS_EN_BEU_SSujeto a errores y cambios

* Aplicación en línea probada "beurer HealthManagerPro" Cloud
** Rodea los órganos internos de la zona abdominal.
Puede conducir a enfermedades como hipertensión y Diabetes.
Óxido de indio y estaño



BF 1000
Super Precisión

beurer
hogar

Báscula Diagnóstica BF1000 de Super Precisión con Análisis Segmentado del Cuerpo con 8 Electrodo




Pesaje para profesionales:
8 electrodos y medidas cruzadas para precisar el monitoreo de áreas específicas del cuerpo.

Súper Precisión, ¿por qué más preciso?
B.I.A usando 8 electrodos (manos y pies).

Gracias a las mediciones cruzadas no solo el cuerpo inferior y superior son medidas por separado, sino también el tronco, piernas y brazos son mostradas.

Nuevo: Grasa visceral
Nuevo: mediciones de grasa visceral, la cual rodea el interior de los órganos en el área abdominal (= grasa orgánica/grasa abdominal)
Esta puede conducir a enfermedades como la hipertensión y diabetes.

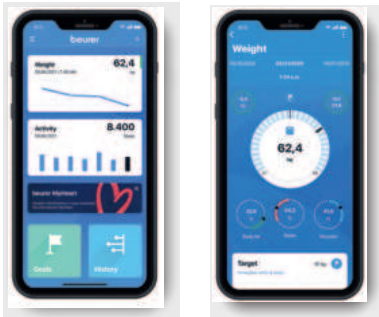

CONEXIÓN

sync via **Bluetooth®**

Redes innovadoras entre PC y smartphone y báscula: realice un seguimiento de sus mediciones y datos corporales en casa y en movimiento. Se sincroniza fácilmente con su teléfono inteligente a través de **Bluetooth®**

works with

Download on the **App Store**

GET IT ON **Google Play**

Syncs with

- iOS ≥ 12.0
- Android™ ≥ 8.0
- **Bluetooth®** 4.0

Lista de dispositivos compatibles

748_60_BF1000_2022-01-17_02_DS_EN_BEU_Sujeto a errores y cambios

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos están registrados Marcas comerciales de su propiedad por Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Beurer GmbH está bajo licencia. Otras marcas comerciales y Los nombres comerciales son los de sus respectivos dueños. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países Países. App Store es un servicio marca de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países Países. Google Play y Google El logotipo de Play son marcas comerciales de Google LLC. Android es un marca comercial de Google LLC.